



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)


محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

**Insopak®MB**  
Medium Level

**اینسوپاک - ام بی**

سطح متوسط

کنسانتره ضد عفونی کننده و پاک کننده  
مخصوص ابزار پزشکی، جراحی و بیهوشی

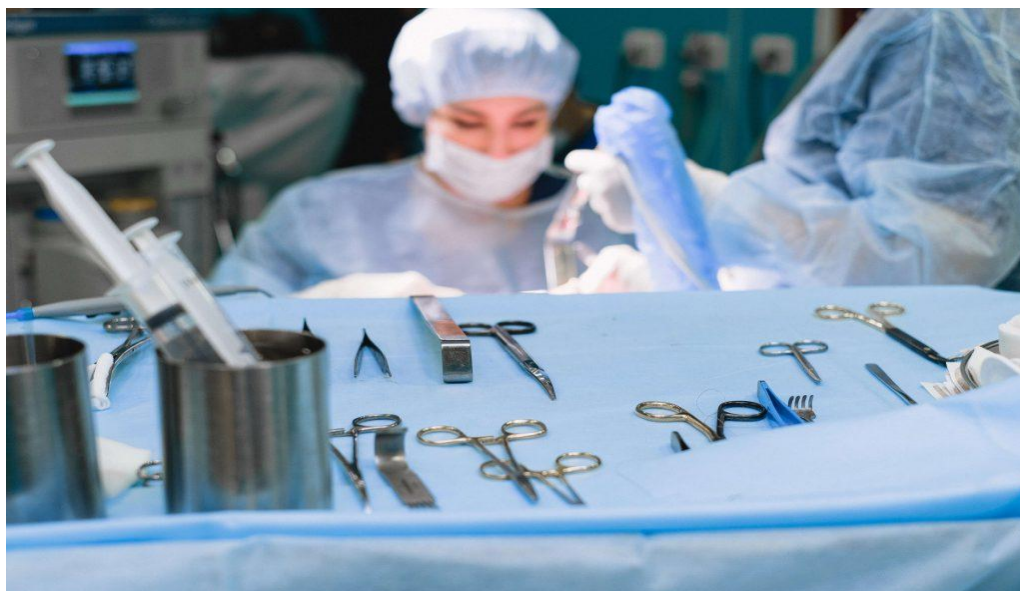

مزایا

- کنسانتره ضد عفونی کننده و پاک کننده سطح متوسط ابزار و وسایل پزشکی
- بر مبنای ماده بنزالکونیوم کلراید، DDAC و سورفکتانت اختصاصی
- دارای طیف وسیع میکروب کشی و پایداری طولانی
- مناسب برای استفاده در حمام اولتراسونیک مناسب
- فاقد فنل، آلدئید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین
- فاقد اثر خوردگی و سازگار با ابزار استیل و مواد غیر فلزی پلاستیکی و سیلیکونی

کاربرد

اینسوپاک - آریو برای ضد عفونی کردن ابزار پزشکی و وسایل استیل در مراکز بیمارستانی، دندانپزشکی با روش غوطه وری تا ۵۰ برابر رقیق سازی (۲٪) مورد استفاده قرار می گیرد.





## گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

### خصوصیات فیزیکوشیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & light yellow
pH	7.0 – 9.0
Density	0.98-0.99
Shelf life	24 Months

### خصوصیات فنی

محلول غلیظ ضد عفونی کننده پاک کننده بطور همزمان دارای اثر ضد میکروبی وسیع الطیف، ضد باکتری، قارچ، مخمر و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت فاقد بخارات اسیدی و قابل استفاده در حمام اولتراسونیک فاقد فنل، آلدهید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین در شرایط عادی قابل استفاده تا ۲ هفته

### هشدارها

فقط برای مصرف ابزار و سطوح است. خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

### شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

### تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

### بسته بندی در هر کارتن

### حجم

۴ عدد	گالن ۵ لیتری
۲۰ عدد	بطری ۱ لیتری

### ترکیبات

بنزالکونیوم کلراید، DDAC، سورفکتانت، EDTA و آب دیونیزه.

### طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ، مخمر، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

### روش استفاده

ابتدا محلول غلیظ را تا رقت ۲ درصد در وان مخصوص رقیق نمایید (۲۰ میلی لیتر محلول در یک لیتر آب) سپس ابزار را از آلودگی های قابل رویت پاک کرده و داخل محلول غوطه ور نمایید بطوری که کلیه قسمتهای ابزار در داخل محلول قرار گیرد. پس از ۱۵ دقیقه ابزار را خارج نمایید و با آب مقطر ابکشی نمایید. ابزار مورد نظر ضد عفونی گردیده است.

